


## 取扱説明書

ロベリア用

### 横移動式 洗浄台

NW-370

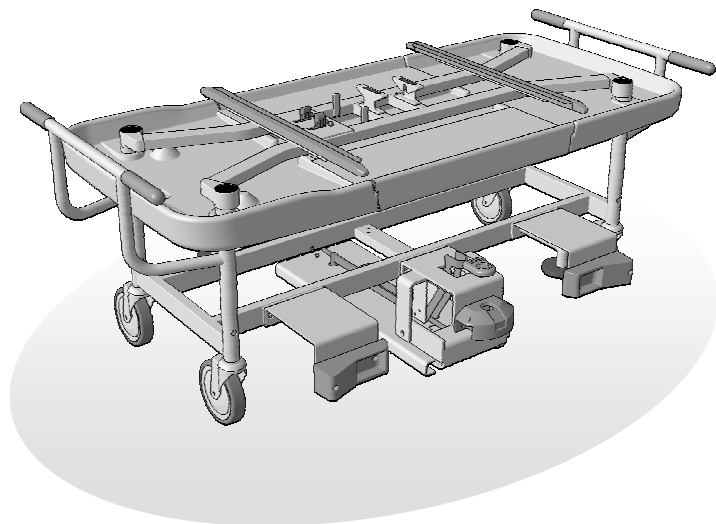

- \*このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- \*正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- \*「取扱説明書」は
  - ・1部を現場用として、常に参照できる状態を保ってください。
  - ・1部を保存用として、大切に保管してください。

## もくじ

|              |    |
|--------------|----|
| 安全上のご注意      | 3  |
| 各部の名称        | 5  |
| ご使用になる前に     | 6  |
| 適用製品         | 6  |
| 入浴の操作方法      | 6  |
| 操作方法（各部）     | 7  |
| 水受盤          | 7  |
| キャスターのロック    | 7  |
| 浴槽への連結       | 8  |
| 担架脱落防止機構     | 9  |
| 日常のお手入れ      | 10 |
| 清掃           | 10 |
| 機器の保守・点検について | 11 |
| 保証とアフターサービス  | 12 |
| 仕 様          | 13 |

### 用 途

本製品は、当社浴槽『ロベリア』（R0B-370、410、415）専用の洗浄台です。

浴槽、担架、ストレッチャーと組合せて、入浴作業（洗浄）を安全に効率よく行うことができます。

### 特 長

◆浴槽に接近しやすい中央スライド式水受盤。

水受盤の中央が 200 mmスライドするので、担架の移動姿勢が楽になり腰への負担を軽減します。

◆担架脱落防止機構。

浴槽やストレッチャーと連結しないと担架のロックがはずれない安全設計です。

## 安全上のご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくために、  
各注意事項をよくお読みのうえ、  
必ずお守りください。

表示の意味は次のようになっています。

-  **危険** … 取り扱いを誤ると、  
死亡または重傷を負うことに至るもの
-  **警告** … 取り扱いを誤ると、  
死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの
-  **注意** … 取り扱いを誤ると、  
傷害または物的損害の発生が想定されるもの

### 絵表示の例

-  **禁 止**：してはいけない「禁止」内容のものです。
-  **強 制**：必ず実行していただく「指示」内容のものです。

### 水受盤

#### 注意

-  **水受盤には、重いものは載せない**  
重量物を載せたり、腰をかけたりすると破損やけがの原因になります。
-  **スライド板の戻りに注意**  
自動的にバネで戻りますので、手など挟まれないように注意してください。

### ご使用後

#### 注意

-  **水受盤に溜まった水は、排水栓を外し排水ジャバラホースより排水する**  
排水させないと洗浄台移動時にこぼれたり、水が腐る恐れがあります。
-  **納入時のビニールカバーは、破棄する**  
製品にかけて使用すると、錆などが発生しやすくなるので、絶対に使用しないでください。

 **警告**


-  **担架を移動するときは、キャスターを必ずロック**  
ロックしていないと、洗浄台が移動し事故の原因になります。
-  **担架上で作業をするときは、キャスターを必ずロック**  
入浴者を担架の上に移乗させるときや担架上で入浴者を洗身するとき、ロックしていないと、洗浄台が移動し事故の原因になります。
-  **連結ロック解除後は、速やかに解除ペダルから、足を離す**  
踏み続けたり、体重を乗せたりすると洗浄台が傾いたり、転倒する恐れがあります。
-  **洗浄台移動後は、キャスターを必ずロック**  
ロックをしていないと、洗浄台が移動し事故の原因になります。
-  **洗浄台を移動するときは、浴室の排水溝蓋の隙間等に注意**  
キャスターが隙間等に挟まると、洗浄台が傾いたり、転倒する恐れがあります。

 **注意**

-  **洗浄台と浴槽の連結を確認**  
連結が不十分だと、担架がスライドしませんので、洗浄台を押し引きして、確実に浴槽に連結していることを確認してください。
-  **洗浄台とストレッチャーの連結を確認**  
連結が不十分だと、担架がスライドしませんので、ストレッチャーを押し引きして、確実に洗浄台と連結していることを確認してください。
-  **洗浄台を移動するときは、ゆっくり静かに**  
入浴者に恐怖感やショックを与えないように、且つげが等が発生させないように入浴者の状態と周囲の状況に十分注意して移動してください。

## 各部の名称

### 洗浄台

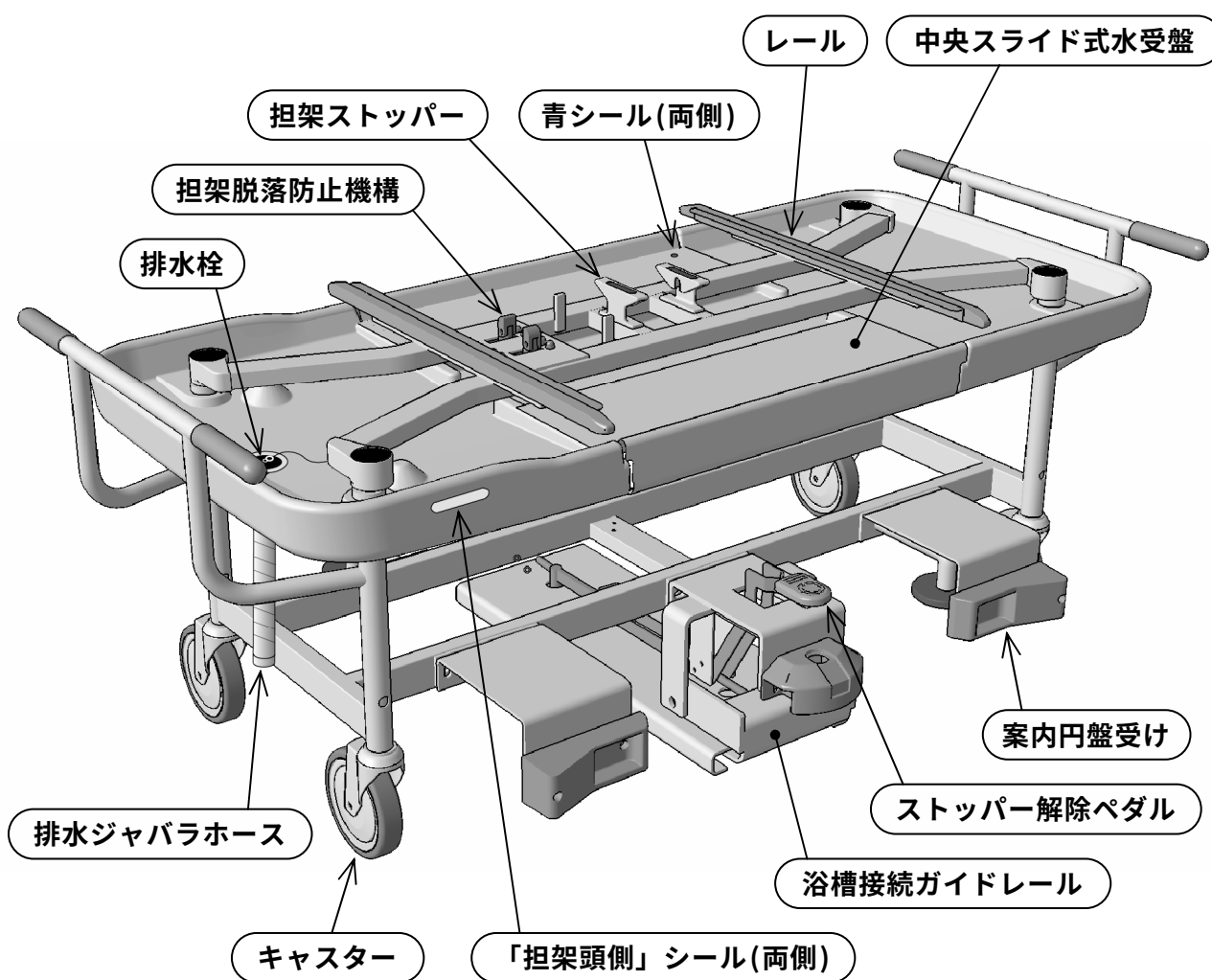

## ご使用になる前に

ご使用前に本製品について P. 11 **始業点検項目**にもとづき、始業点検を実施してください。またこれ以外でも部品が破損しているなど、日頃お使いになられていたときとは違う異常を感じましたら、本製品を使用せずに、最寄りの営業所にご連絡ください。

破損、異常を感じたままのご使用は、危険ですから絶対におやめください。

### 適用製品

本製品は、当社浴槽『ロベリア』(R0B-370、410、415)専用の洗浄台であり、専用の担架(WS-370、400、405)を乗せて洗浄作業をします。

必ず専用の浴槽・担架・ストレッチャー(ST-370,380)・洗浄台と組み合わせて使用してください。

### 入浴の操作方法

浴槽・担架・ストレッチャーの操作方法及び入浴手順について、本洗浄台を使用する前に各々の取扱説明書を十分に読んでからご使用ください。


### ●ご使用中に…

万一故障が発生したら、ただちに入浴者を安全な場所に退避させた後、使用を中止して最寄りの営業所へご連絡ください。

## 操作方法(各部)

### 水受盤


水受盤中央のスライド板を大腿部で軽く押すと 200 mm スライドします。離れるとスライド板は自動的に戻ります。

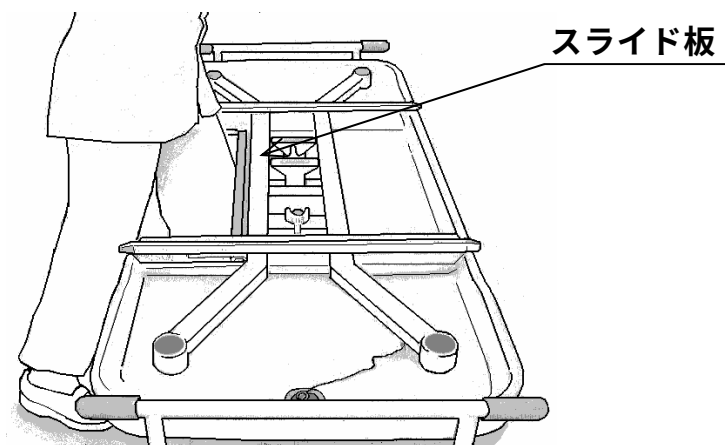

- ⚠ 注意** ・水受盤には、重いものは載せない  
・スライド板の戻りに注意

### キャスターのロック

キャスターのロックは浴槽から遠い方にある2か所のキャスターストッパーを踏んで行います。踏むとロックされ、ロックを解除するときは解除用ノッチを踏んでください。

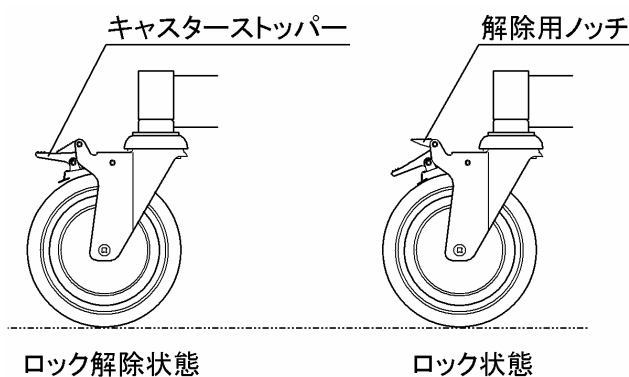

- ⚠ 警告** ・担架を移動するときは、キャスターを必ずロック  
・担架上で作業をするときは、キャスターを必ずロック


## 浴槽への連結

### ★横移動

- 1 浴槽下部に取り付けられている浴槽接続ガイドレールに沿って 440 mm 移動します。
- 2 ストッパー解除ペダルを踏みながら少し移動させた後、ストッパー解除ペダルから足を離し、押しながらストッパーがかかる位置まで移動すると固定されます。
- 3 連結後はキャスターをロックしてください。

### ★連結の解除

- 1 キャスターのロックを解除します。
- 2 ストッパー解除ペダルを踏みながら浴槽から離すと連結が解除されます。
- 3 ストッパー解除ペダルから足を離して、洗浄台を移動します。

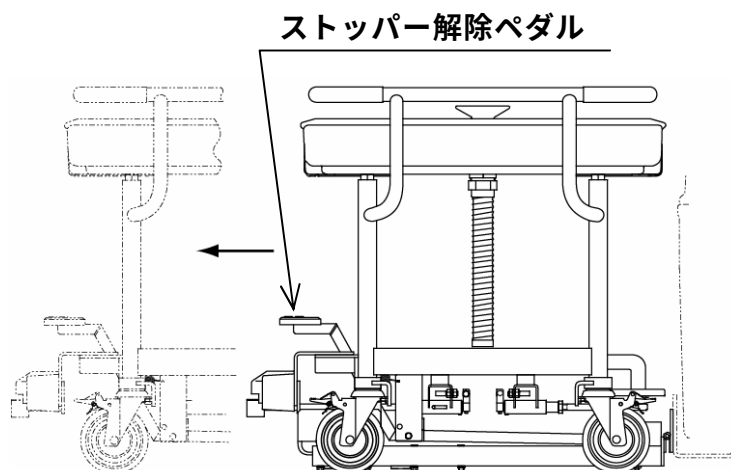

**警告** ・連結ロック解除後は、速やかにストッパー解除ペダルから、足を離す  
・横移動後は、必ず 2 か所のキャスターをロック

## 担架脱落防止機構

本製品には、担架脱落防止機構が装備されています。

洗浄台を浴槽(ストレッチャーを洗浄台)に連結していないときは、担架脱落防止機構が働き、担架を移動させることはできません。

- 洗浄台を浴槽に連結したとき、浴槽側の担架脱落防止機構が解除され、浴槽⇄洗浄台間で担架の移動が可能になります。洗浄台の非連結側には担架脱落防止機構が働き、移動できませんので、担架が脱落する恐れはありません。
- ストレッチャーを洗浄台に連結したとき、ストレッチャー側の担架脱落防止機構が解除され、ストレッチャー⇄洗浄台間で担架の移動が可能になります。洗浄台の非連結側には担架脱落防止機構が働き、移動できませんので、担架が脱落する恐れはありません。



**注意 ・ 洗浄台と浴槽の連結を確認**

**・ 洗浄台とストレッチャーの連結を確認**

### 参考

担架脱落防止機構は、万一浴槽から担架を洗浄台に移動する(戻す)途中で洗浄台が浴槽から離れてしまっても、担架全体が洗浄台のレール上に移動していれば、洗浄台中央の担架ストッパー位置まで移動させる(戻す)ことができるようになっています。(洗浄台からストレッチャーに移動する場合も同様)

## 日常のお手入れ

### 清掃

- ステンレス部は、水滴をそのままにしておくと水垢が残り汚くなります。  
乾いた布で水滴をきれいに拭き取ってください。
- 水受盤が黒ずんだ場合には、市販の液体クレンザーで表面を洗浄してください。

## 機器の保守・点検について

- ・本製品については、機器の管理者の方が以下の点検項目に基づき、必ず始業点検（日常の製品使用前）を実施してください。
- ・長期間使用しなかった製品を使用再開する場合は、機器が正常に動作するか十分な点検を行ってください。
- ・点検時に異常が発見された場合は、製品の使用を中止して最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
- ・清掃等の簡単な保守は機器の管理者等によって実施するようお願いいたします。

### ● 始業点検項目

| 区分 | 点検内容                                      | 点検方法                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観 | 障害物の有無                                    | 目視                                                                                                                                                                                                   |
|    | キャスターの緩み、ガタつき、<br>抜け出し                    | 目視<br>及び、触って確認                                                                                                                                                                                       |
|    | キャスターの車輪の摩耗                               | 目視                                                                                                                                                                                                   |
| 機能 | キャスターのロック作動                               | キャスターストッパーをロック方向に踏んでキャスターの回転のロックを確認                                                                                                                                                                  |
|    | 連結用ストッパーの作動とスト<br>ッパー解除ペダルの作動             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗浄台を浴槽と連結した後、洗浄台を押し引きしてストッパーがはずれないことを確認</li> <li>・ストッパーがかかる位置まで洗浄台を浴槽から離れた後、洗浄台を押し引きしてストッパーがはずれないことを確認</li> </ul>                                            |
|    | 担架スライド防止機構<br>(洗浄台上に担架(Ws-370)を<br>乗せて確認) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・浴槽に連結させないで担架のロックを解除しても、担架が移動しないことを確認</li> <li>・浴槽と連結したとき、担架が浴槽へ移動できること、及び担架を洗浄台に戻すとき、担架が非連結側に脱落しないことを確認</li> <li>・洗浄台を浴槽から離れた状態で、ストレッチャー⇄洗浄台間でも確認</li> </ul> |

### ● 定期保守点検契約のお勧め

製品を長期間正常な状態で安全に使用できるように保証期間後の「保守点検契約」の締結をお勧めします。詳しくは別添の「保守点検契約のお勧め」をご覧ください。

## 保証とアフターサービス

### ◆保証書と保証期間について

- 保証書（別添）はよく読んで大切に保管してください。保証書がないと保証期間中でも代金を請求させていただく場合があります。
- 保証期間は、正常な使用状態で故障した場合、本体フレームは 5 年間、それ以外は 1 年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

### ◆修理を依頼される場合

- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

機種名     :   NW-370

お買い上げ年月日

故障状況(できるだけ詳細に)

住所、氏名、電話番号

- メーカーより指示のあるとき以外は、決して開けたり分解しないでください。

### ◆消耗品

（使用により、磨耗・劣化・変質等が生じ、本来の機能が発揮できなくなるもの）

- 正常な使用において、交換の目安が約 3 年のもの。

キャスター

点検の時期が来ましたら弊社営業所までご用命ください。点検して必要により有償交換いたします。

### ◆耐用期間

10 年：保守点検などの当社推奨環境で使用された場合

### ◆保守部品の保有期間

保守用性能部品の保有期間は、販売中止後 10 年です。ただし、性能部品が製造中止などにより入手不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあります。

## 仕 様

|             |      |                                         |
|-------------|------|-----------------------------------------|
| 型 式         |      | NW-370                                  |
| 外形寸法        |      | 1630(L)×795(W)×720(H)mm                 |
| 質 量         |      | 約 60 kg                                 |
| 最大搭乗質重（入浴者） |      | 100 kg                                  |
| 材質          | フレーム | ステンレス・一部粉体塗装仕上                          |
|             | 水受盤  | プラスチック（ポリプロピレン）<br>スライド部：ステンレス、メラミン塗装仕上 |
| キャスター       |      | φ125 mm(個別ロック)                          |
| その他         |      | 担架スライド防止機構                              |

注．都合により予告なく仕様の変更を行う場合があります。